

Prostein antibody [MSVA-460R] HistoMAX™

Cat. No. GTX04965

宿主	Rabbit
克隆	Monoclonal
同种型	IgG
实验应用	IHC-P
种属反应	Human

产品说明

摘要 This antibody was validated on 76 different Normal Tissues by IHC-P.

实验应用

应用说明

*最佳稀释倍数与浓度应由研究人员确认

Suggested dilution	Recommended dilution
IHC-P	1:100 - 1:200

Note : Heat-induced antigen retrieval for 5 minutes in an autoclave at 121°C in pH 7.8 Tris-EDTA-based Target Retrieval Solution buffer.

以下为常规应用缩写的中文注解

WB: 免疫印迹

ICC/IF: 细胞染色

IHC-P: 石蜡切片

IHC-Fr: 冰冻切片


属性

形式	Liquid
存储溶液	10mM PBS, BSA (Please contact us for sodium azide-free or sodium azide and BSA-free format)
保存剂	sodium azide
存放说明	Store as concentrated solution. Centrifuge briefly prior to opening vial. For short-term storage (1-2 weeks), store at 4°C. For long-term storage, aliquot and store at -20°C or below. Avoid multiple freeze-thaw cycles.
浓度	66.66 µg/ml (Please refer to the vial label for the specific concentration.)
偶联	Unconjugated
注意事项	仅供实验室使用。不适用于人类或动物的任何临床，治疗或诊断用途。不适合动物或人类食用。



For full product information, images and publications, please visit our [website](#).


產品圖片

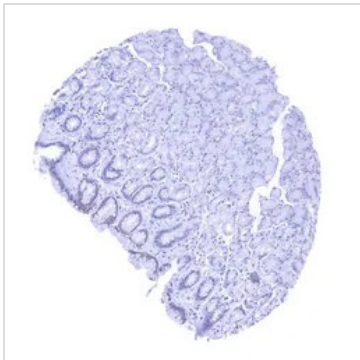

GTx04965 IHC-P Image

IHC-P analysis of human gastric mucosa tissue using GTx04965 Prostein antibody [MSVA-460R] HistoMAX™.


Stomach mucosa with granular cytoplasmic prostein staining of surface epithelial cells.

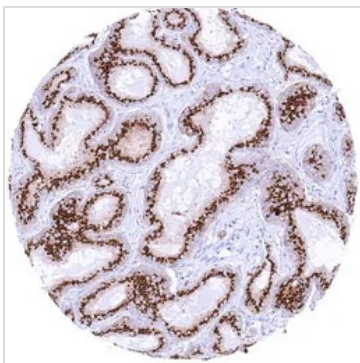

GTx04965 IHC-P Image

IHC-P analysis of human prostatic adenocarcinoma (PAC) tissue (Gleason 3+3=6) using GTx04965 Prostein antibody [MSVA-460R] HistoMAX™.

Prostatic adenocarcinoma (Gleason 3+3=6) with strong granular perinuclear cytoplasmic prostein staining of tumor cells.

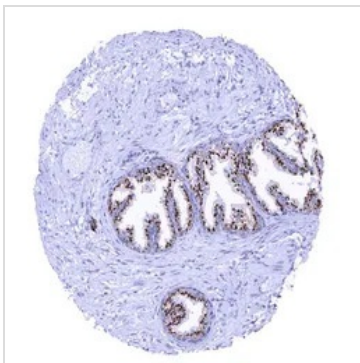

GTx04965 IHC-P Image

IHC-P analysis of human prostate tissue using GTx04965 Prostein antibody [MSVA-460R] HistoMAX™.

Normal prostate with strong granular perinuclear cytoplasmic prostein staining of luminal cells.



For full product information, images and publications, please visit our [website](https://www.genetex.com).