

Ferritin Light Chain antibody [N1C3]

Cat. No. GTX101211

| | |
|------|--------------|
| 宿主 | Rabbit |
| 克隆 | Polyclonal |
| 同种型 | IgG |
| 实验应用 | WB, IHC-P |
| 种属反应 | Human, Mouse |

★★★★★ 产品评论 (1)

实验应用

应用说明

*最佳稀释倍数与浓度应由研究人员确认

| Suggested dilution | Recommended dilution |
|--------------------|----------------------|
| WB | 1:500-1:3000 |
| IHC-P | 1:100-1:1000 |

以下为常规应用缩写的中文注解

WB: 免疫印迹

ICC/IF: 细胞染色

IHC-P: 石蜡切片


IHC-Fr: 冰冻切片

属性

| | |
|------|--|
| 形式 | Liquid |
| 存储溶液 | PBS, 10% Glycerol; 1% BSA |
| 保存剂 | 0.01% Thimerosal |
| 存放说明 | Store as concentrated solution. Centrifuge briefly prior to opening vial. For short-term storage (1-2 weeks), store at 4°C. For long-term storage, aliquot and store at -20°C or below. Avoid multiple freeze-thaw cycles. |
| 浓度 | 0.27 mg/ml (Please refer to the vial label for the specific concentration.) |
| 偶联 | Unconjugated |
| RRID | AB_1240809 |
| 注意事项 | 仅供实验室使用。不适用于人类或动物的任何临床, 治疗或诊断用途。不适合动物或人类食用。 |


For full product information, images and publications, please visit our [website](#).

產品圖片

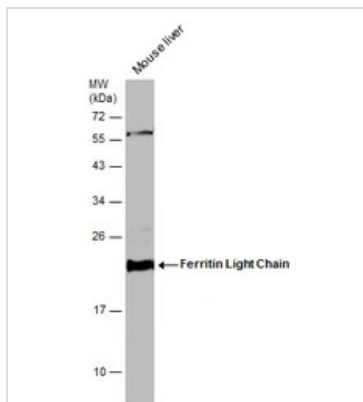

GTX101211 WB Image


Mouse tissue extract (50 µg) was separated by 12% SDS-PAGE, and the membrane was blotted with Ferritin Light Chain antibody [N1C3] (GTX101211) diluted at 1:1000.

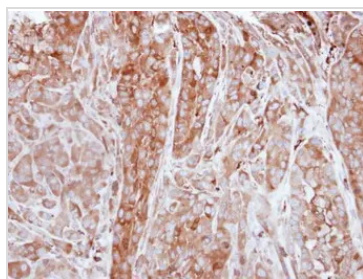

GTX101211 IHC-P Image

Immunohistochemical analysis of paraffin-embedded A549 xenograft, using FTL(GTX101211) antibody at 1:500 dilution.

Antigen Retrieval: Citrate buffer, pH 6.0, 15 min

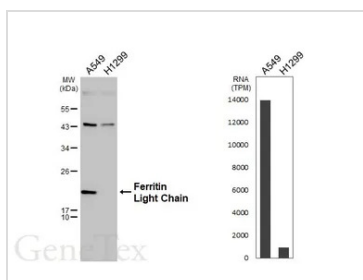

GTX101211 WB Image

Various whole cell extracts (30 µg) were separated by 12% SDS-PAGE, and the membrane was blotted with Ferritin Light Chain antibody [N1C3] (GTX101211) diluted at 1:1000. The HRP-conjugated anti-rabbit IgG antibody (GTX213110-01) was used to detect the primary antibody. Corresponding RNA expression data for the same cell lines are based on Human Protein Atlas program.



For full product information, images and publications, please visit our [website](#).