

## ProDynorphin antibody

Cat. No. GTX10280

|      |             |
|------|-------------|
| 宿主   | Guinea pig  |
| 克隆   | Polyclonal  |
| 同种型  | IgG         |
| 实验应用 | IHC-Fr, IHC |
| 种属反应 | Mouse, Rat  |

引用文献 (4)

## 实验应用

## 应用说明

\*最佳稀释倍数与浓度应由研究人员确认

| Suggested dilution | Recommended dilution |
|--------------------|----------------------|
| IHC-Fr             | 1:250-1:1000         |
| IHC                | Assay dependent      |

以下为常规应用缩写的中文注解

WB: 免疫印迹

ICC/IF: 细胞染色

IHC-P: 石蜡切片


IHC-Fr: 冰冻切片

## 属性

|      |                                                                                                                                                                                                                            |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 形式   | Liquid                                                                                                                                                                                                                     |
| 存储溶液 | PBS, 30% Glycerol                                                                                                                                                                                                          |
| 保存剂  | 0.05% Sodium azide                                                                                                                                                                                                         |
| 存放说明 | Store as concentrated solution. Centrifuge briefly prior to opening vial. For short-term storage (1-2 weeks), store at 4°C. For long-term storage, aliquot and store at -20°C or below. Avoid multiple freeze-thaw cycles. |
| 浓度   | 1 mg/ml (Please refer to the vial label for the specific concentration.)                                                                                                                                                   |
| 偶联   | Unconjugated                                                                                                                                                                                                               |
| RRID | AB_380971                                                                                                                                                                                                                  |
| 注意事项 | 仅供实验室使用。不适用于人类或动物的任何临床, 治疗或诊断用途。不适合动物或人类食用。                                                                                                                                                                                |

For full product information, images and publications, please visit our [website](#).

## 產品圖片

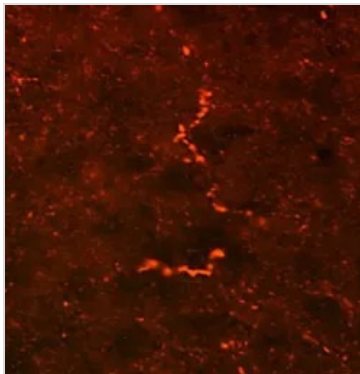


### GTX10280 IHC Image

IHC analysis of rat hypothalamus tissue using GTX10280 ProDynorphin antibody.



### GTX10280 IHC Image

IHC analysis of mouse spinal cord tissue using GTX10280 ProDynorphin antibody.

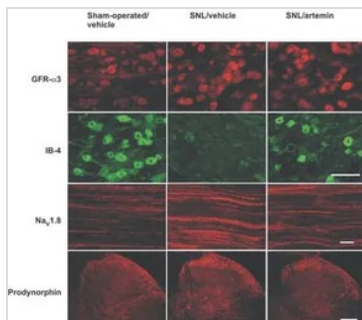

### GTX10280 IHC Image

IHC analysis of ipsilateral L5 DRG, dorsal spinal cords and sciatic nerves of SNL rats using GTX10280 ProDynorphin antibody. Immunofluorescent labeling was done 14 d after sham or SNL surgery and treatment with vehicle or artemin starting on day 3 after surgery.



For full product information, images and publications, please visit our [website](#).