

DMC1 antibody [N1C1]

Cat. No. GTX103062

宿主	Rabbit
克隆	Polyclonal
同种型	IgG
实验应用	WB, IHC-P
种属反应	Human, Mouse

实验应用

应用说明

*最佳稀释倍数与浓度应由研究人员确认

Suggested dilution	Recommended dilution
WB	1:500-1:3000
IHC-P	1:100-1:1000

以下为常规应用缩写的中文注解

WB: 免疫印迹

ICC/IF: 细胞染色

IHC-P: 石蜡切片

IHC-Fr: 冰冻切片


属性

形式	Liquid
存储溶液	0.1M Tris, 0.1M Glycine, 20% Glycerol
保存剂	0.01% Thimerosal
存放说明	Store as concentrated solution. Centrifuge briefly prior to opening vial. For short-term storage (1-2 weeks), store at 4°C. For long-term storage, aliquot and store at -20°C or below. Avoid multiple freeze-thaw cycles.
浓度	0.9 mg/ml (Please refer to the vial label for the specific concentration.)
偶联	Unconjugated
RRID	AB_2036772
注意事项	仅供实验室使用。不适用于人类或动物的任何临床, 治疗或诊断用途。不适合动物或人类食用。



For full product information, images and publications, please visit our [website](#).

產品圖片

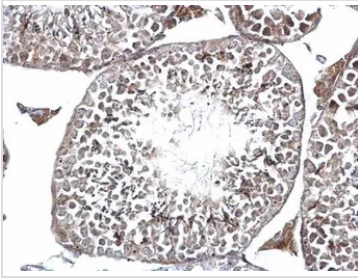


GTX103062 IHC-P Image

DMC1 antibody [N1C1] detects DMC1 protein at nucleolus on mouse testis by immunohistochemical analysis.

Sample: Paraffin-embedded mouse testis.

DMC1 antibody [N1C1] (GTX103062) dilution: 1:500.

Antigen Retrieval: Trilogy™ (EDTA based, pH 8.0) buffer, 15min

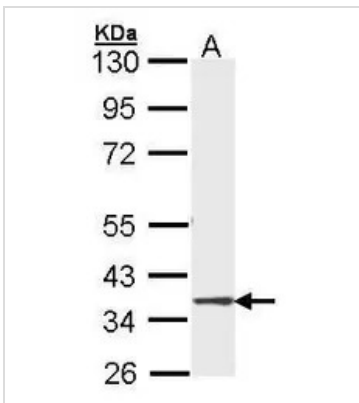


GTX103062 WB Image

Sample (30 ug of whole cell lysate)

A: Molt-4 (GTX27912)

10% SDS PAGE


GTX103062 diluted at 1:1000

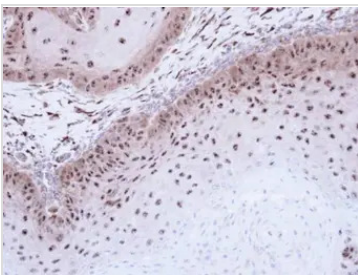

GTX103062 IHC-P Image

Immunohistochemical analysis of paraffin-embedded Cal27 xenograft, using DMC1(GTX103062) antibody at 1:500 dilution.

Antigen Retrieval: Trilogy™ (EDTA based, pH 8.0) buffer, 15min

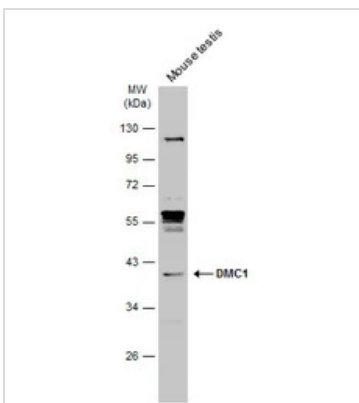

GTX103062 WB Image

Mouse tissue extract (50 µg) was separated by 10% SDS-PAGE, and the membrane was blotted with DMC1 antibody [N1C1] (GTX103062) diluted at 1:1000. The HRP-conjugated anti-rabbit IgG antibody (GTX213110-01) was used to detect the primary antibody, and the signal was developed with Trident ECL plus-Enhanced.



For full product information, images and publications, please visit our [website](https://www.genetex.com).