

RAC2 antibody [N1C3]

Cat. No. GTX113262

宿主	Rabbit
克隆	Polyclonal
同种型	IgG
实验应用	WB, ICC/IF, IHC-P
种属反应	Human, Mouse

实验应用

应用说明

*最佳稀释倍数与浓度应由研究人员确认

Suggested dilution	Recommended dilution
WB	1:500-1:3000
ICC/IF	Assay dependent
IHC-P	1:100-1:1000

以下为常规应用缩写的中文注解

WB: 免疫印迹

ICC/IF: 细胞染色

IHC-P: 石蜡切片


IHC-Fr: 冰冻切片

属性

形式	Liquid
存储溶液	PBS, 20% Glycerol
保存剂	0.025% ProClin 300
存放说明	Store as concentrated solution. Centrifuge briefly prior to opening vial. For short-term storage (1-2 weeks), store at 4°C. For long-term storage, aliquot and store at -20°C or below. Avoid multiple freeze-thaw cycles.
浓度	1.43 mg/ml (Please refer to the vial label for the specific concentration.)
偶联	Unconjugated
RRID	AB_1951589
注意事项	仅供实验室使用。不适用于人类或动物的任何临床、治疗或诊断用途。不适合动物或人类食用。

For full product information, images and publications, please visit our [website](#).

產品圖片

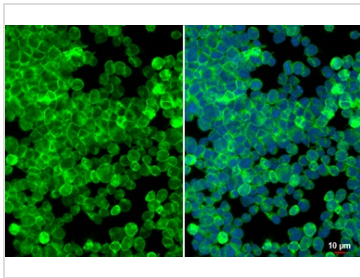


GTx113262 ICC/IF Image

RAC2 antibody [N1C3] detects RAC2 protein at cell membrane and cytoplasm by immunofluorescent analysis.

Sample: MOLT-4 cells were fixed in 4% paraformaldehyde at RT for 15 min.


Green: RAC2 stained by RAC2 antibody [N1C3] (GTx113262) diluted at 1:500.

Blue: Fluoroshield with DAPI (GTx30920).

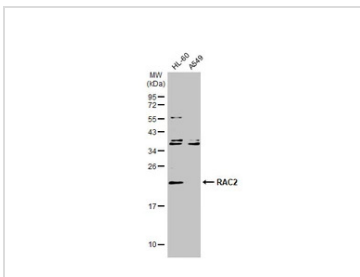

GTx113262 WB Image

Various whole cell extracts (30 µg) were separated by 12% SDS-PAGE, and the membrane was blotted with RAC2 antibody [N1C3] (GTx113262) diluted at 1:1000. The HRP-conjugated anti-rabbit IgG antibody (GTx213110-01) was used to detect the primary antibody.

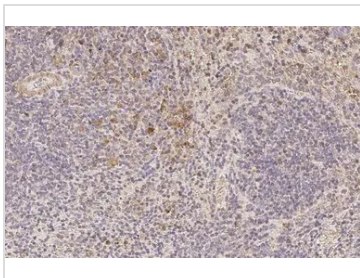


GTx113262 IHC-P Image

RAC2 antibody [N1C3] detects RAC2 protein at cytoplasm by immunohistochemical analysis.

Sample: Paraffin-embedded mouse spleen.

RAC2 stained by RAC2 antibody [N1C3] (GTx113262) diluted at 1:500.

Antigen Retrieval: Citrate buffer, pH 6.0, 15 min

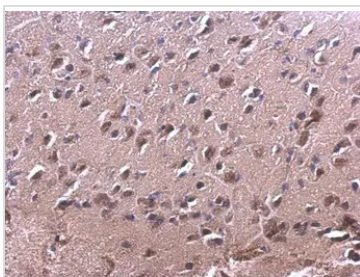


GTx113262 IHC-P Image

RAC2 antibody [N1C3] detects RAC2 protein at cytosol on mouse fore brain by immunohistochemical analysis.

Sample: Paraffin-embedded mouse fore brain.

RAC2 antibody [N1C3] (GTx113262) dilution: 1:500.

Antigen Retrieval: Trilogy™ (EDTA based, pH 8.0) buffer, 15min

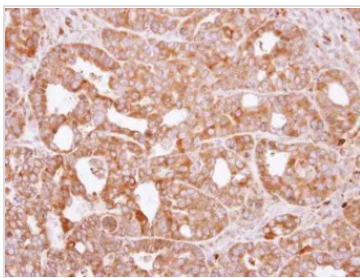

GTx113262 IHC-P Image

Immunohistochemical analysis of paraffin-embedded NCI-N87 xenograft, using RAC2(GTx113262) antibody at 1:500 dilution.

Antigen Retrieval: Trilogy™ (EDTA based, pH 8.0) buffer, 15min



For full product information, images and publications, please visit our [website](https://www.genetex.com).