

Rabbit Anti-Horn shark IgNar antibody

Cat. No. GTX128445

宿主	Rabbit
克隆	Polyclonal
同种型	IgG
实验应用	WB
种属反应	Shark

引用文献 (2)

Package

100 µl, 25 µl

实验应用

应用说明

*最佳稀释倍数与浓度应由研究人员确认

Suggested dilution	Recommended dilution
WB	1:5000-1:20000

以下为常规应用缩写的中文注解

WB: 免疫印迹

ICC/IF: 细胞染色

IHC-P: 石蜡切片

IHC-Fr: 冰冻切片


属性

形式	Liquid
存储溶液	PBS, 20% Glycerol
保存剂	0.025% ProClin 300
存放说明	Store as concentrated solution. Centrifuge briefly prior to opening vial. For short-term storage (1-2 weeks), store at 4°C. For long-term storage, aliquot and store at -20°C or below. Avoid multiple freeze-thaw cycles.
浓度	0.15 mg/ml (Please refer to the vial label for the specific concentration.)
免疫原	Full length Horn shark IgNar recombinant protein(AAX10144.1)
纯化方式	Purified by antigen-affinity chromatography.
偶联	Unconjugated
注意事项	仅供实验室使用。不适用于人类或动物的任何临床、治疗或诊断用途。不适合动物或人类食用。



For full product information, images and publications, please visit our [website](#).

產品圖片

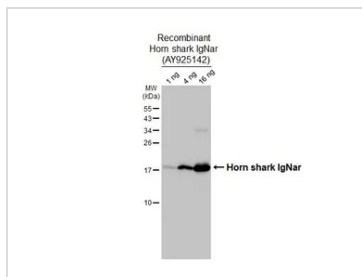

GTX128445 WB Image

Recombinant Horn shark IgNar (AY925142) were separated by 15% SDS-PAGE, and the membrane was blotted with Horn shark IgNar antibody (GTX128445) diluted at 1:1000. The HRP-conjugated anti-rabbit IgG antibody (GTX213110-01) was used to detect the primary antibody.



For full product information, images and publications, please visit our [website](https://www.genetex.com).