

vGluT3 antibody

Cat. No. GTX133267

宿主	Rabbit
克隆	Polyclonal
同种型	IgG
实验应用	IHC-P, IHC-Fr
种属反应	Mouse

★★★★★ 产品评论 (1)

实验应用

应用说明

*最佳稀释倍数与浓度应由研究人员确认

Suggested dilution	Recommended dilution
IHC-P	1:100-1:1000
IHC-Fr	Assay dependent

以下为常规应用缩写的中文注解

WB: 免疫印迹

ICC/IF: 细胞染色

IHC-P: 石蜡切片

IHC-Fr: 冰冻切片


属性

形式	Liquid
存储溶液	PBS, 1% BSA, 20% Glycerol
保存剂	0.025% ProClin 300
存放说明	Store as concentrated solution. Centrifuge briefly prior to opening vial. For short-term storage (1-2 weeks), store at 4°C. For long-term storage, aliquot and store at -20°C or below. Avoid multiple freeze-thaw cycles.
浓度	0.34 mg/ml (Please refer to the vial label for the specific concentration.)
偶联	Unconjugated
RRID	AB_2886900
注意事项	仅供实验室使用。不适用于人类或动物的任何临床, 治疗或诊断用途。不适合动物或人类食用。

For full product information, images and publications, please visit our [website](#).

Date 2025 / 07 / 09 Page 1 of 2

產品圖片

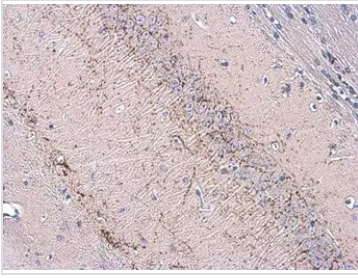


GTX133267 IHC-P Image

vGluT3 antibody detects vGluT3 protein at cell membrane by immunohistochemical analysis.

Sample: Paraffin-embedded mouse hippocampus.

vGluT3 stained by vGluT3 antibody (GTX133267) diluted at 1:500.

Antigen Retrieval: Citrate buffer, pH 6.0, 15 min

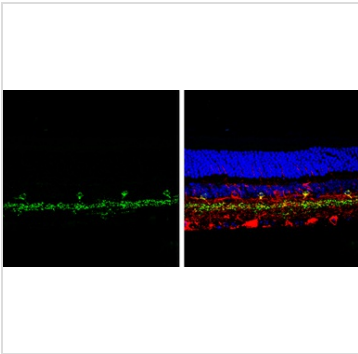

GTX133267 IHC-P Image

vGluT3 antibody detects vGluT3 protein by immunohistochemical analysis.

Samples: Paraffin-embedded mouse retina.

Green: vGluT3 protein stained by vGluT3 antibody (GTX133267) diluted at 1:250.

Red: beta Tubulin 3/ Tuj1, a marker, stained by beta Tubulin 3/ Tuj1 antibody [GT1338] (GTX631831) diluted at 1:500.

Blue: Fluoroshield with DAPI (GTX30920).

Antigen Retrieval: Citrate buffer, pH 6.0, 15 min



For full product information, images and publications, please visit our [website](#).