

DPP6 antibody

Cat. No. GTX133338

宿主	Rabbit
克隆	Polyclonal
同种型	IgG
实验应用	WB, IHC-P, IHC-Fr
种属反应	Mouse, Rat

实验应用

应用说明

*最佳稀释倍数与浓度应由研究人员确认

Suggested dilution	Recommended dilution
WB	1:500-1:3000
IHC-P	1:100-1:1000
IHC-Fr	1:100-1:1000

以下为常规应用缩写的中文注解

WB: 免疫印迹

ICC/IF: 细胞染色

IHC-P: 石蜡切片

IHC-Fr: 冰冻切片

属性

形式	Liquid
存储溶液	PBS, 20% Glycerol
保存剂	0.025% ProClin 300
存放说明	Store as concentrated solution. Centrifuge briefly prior to opening vial. For short-term storage (1-2 weeks), store at 4°C. For long-term storage, aliquot and store at -20°C or below. Avoid multiple freeze-thaw cycles.
浓度	0.66 mg/ml (Please refer to the vial label for the specific concentration.)
偶联	Unconjugated
RRID	AB_2886939
注意事项	仅供实验室使用。不适用于人类或动物的任何临床, 治疗或诊断用途。不适合动物或人类食用。



For full product information, images and publications, please visit our [website](#).

產品圖片




GTX133338 IHC-P Image

DPP6 antibody detects DPP6 protein at cell membrane in mouse brain by immunohistochemical analysis.

Sample: Paraffin-embedded mouse brain.


DPP6 antibody (GTX133338) diluted at 1:500.

Antigen Retrieval: Citrate buffer, pH 6.0, 15 min

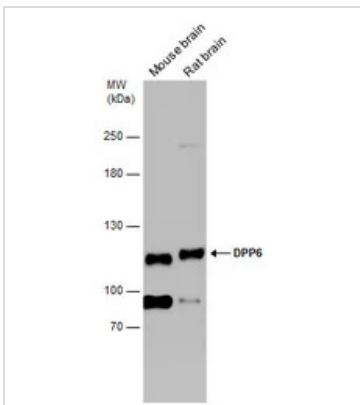

GTX133338 WB Image

Various tissue extracts (50 µg) were separated by 5% SDS-PAGE, and the membrane was blotted with DPP6 antibody (GTX133338) diluted at 1:1000.

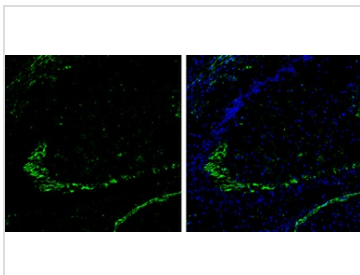

GTX133338 IHC-Fr Image

DPP6 antibody detects DPP6 protein expression by immunohistochemical analysis.

Sample: Frozen-sectioned adult mouse hippocampus.

Green: DPP6 protein stained by DPP6 antibody (GTX133338) diluted at 1:250.

Blue: Fluoroshield with DAPI (GTX30920).



For full product information, images and publications, please visit our [website](https://www.genetex.com).