

PKC gamma (phospho Thr655) antibody

Cat. No. GTX25796

宿主	Rabbit
克隆	Polyclonal
同种型	IgG
实验应用	WB, IHC-P, FCM
种属反应	Human, Mouse

实验应用

应用说明

*最佳稀释倍数与浓度应由研究人员确认

Suggested dilution	Recommended dilution
WB	1:250
IHC-P	1:10-1:50
FCM	1:20

以下为常规应用缩写的中文注解

WB: 免疫印迹

ICC/IF: 细胞染色

IHC-P: 石蜡切片

IHC-Fr: 冰冻切片


属性

形式	Liquid
存储溶液	PBS, 0.1% BSA
保存剂	0.05% Sodium azide
存放说明	Store as concentrated solution. Centrifuge briefly prior to opening vial. For short-term storage (1-2 weeks), store at 4°C. For long-term storage, aliquot and store at -20°C or below. Avoid multiple freeze-thaw cycles.
浓度	Batch dependent (Please refer to the vial label for the specific concentration.)
偶联	Unconjugated
注意事项	仅供实验室使用。不适用于人类或动物的任何临床、治疗或诊断用途。不适合动物或人类食用。



For full product information, images and publications, please visit our [website](#).


產品圖片

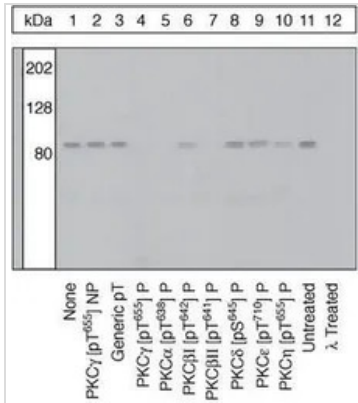

GTX25796 WB Image

WB analysis of samples using GTX25796 PKC gamma (phospho Thr655) antibody. The data show that only the immunogen phosphopeptide blocks the signal, demonstrating the specificity of the antibody. The membrane treated with phosphatase (Lane 12) eliminates the signal further verifying that the antibody is phospho-specific.

Dilution : 1:500

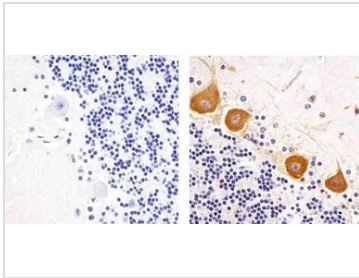

GTX25796 IHC-P Image


IHC-P analysis of human cerebellum tissue using GTX25796 PKC gamma (phospho Thr655) antibody.

Right : Primary antibody

Left : Negative control without primary antibody

Antigen retrieval : 10mM sodium citrate (pH 6.0), microwaved for 8-15 min

Dilution : 1:20

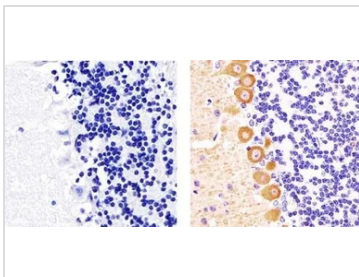

GTX25796 IHC-P Image


IHC-P analysis of human cerebellum tissue using GTX25796 PKC gamma (phospho Thr655) antibody.

Right : Primary antibody

Left : Negative control without primary antibody

Antigen retrieval : 10mM sodium citrate (pH 6.0), microwaved for 8-15 min

Dilution : 1:20

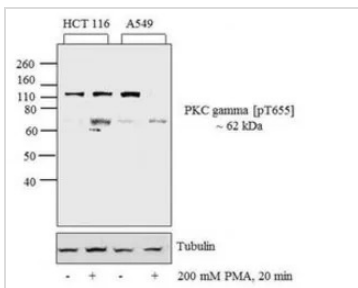

GTX25796 WB Image

WB analysis of whole cell extracts (30 μg lysate) of HCT 116 (Lane 1), treated for 20 minutes with 200 mM of PMA (Lane 2), and A549 (Lane 3) treated for 20 minutes with 200 mM of PMA (Lane 4) using GTX25796 PKC gamma (phospho Thr655) antibody.

Dilution : 1:500



For full product information, images and publications, please visit our [website](https://www.genetex.com).