

DPP6 antibody

Cat. No. GTX54792

宿主	Rabbit
克隆	Polyclonal
同种型	IgG
实验应用	WB, IHC-Fr, IHC (Free Floating)
种属反应	Human, Mouse, Rat

实验应用

应用说明

*最佳稀释倍数与浓度应由研究人员确认

Suggested dilution	Recommended dilution
WB	Assay dependent
IHC-Fr	Assay dependent
IHC (Free Floating)	Assay dependent

以下为常规应用缩写的中文注解

WB: 免疫印迹

ICC/IF: 细胞染色

IHC-P: 石蜡切片

IHC-Fr: 冰冻切片


属性

形式	Liquid
存储溶液	PBS, 1% BSA
保存剂	0.05% Sodium azide
存放说明	Store as concentrated solution. Centrifuge briefly prior to opening vial. For short-term storage (1-2 weeks), store at 4°C. For long-term storage, aliquot and store at -20°C or below. Avoid multiple freeze-thaw cycles.
浓度	0.8 mg/ml (Please refer to the vial label for the specific concentration.)
偶联	Unconjugated
注意事项	仅供实验室使用。不适用于人类或动物的任何临床、治疗或诊断用途。不适合动物或人类食用。



For full product information, images and publications, please visit our [website](#).

產品圖片

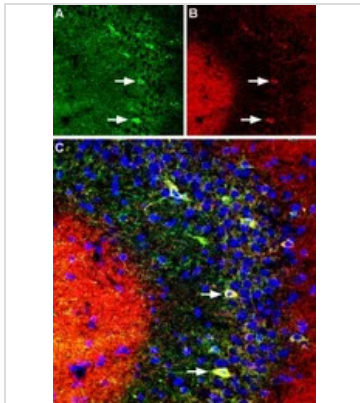

GTX54792 WB Image

IHC-Frfl (free floating) analysis of rat hippocampus tissue using GTX54792 DPP6 antibody. Cell nuclei are stained with DAPI (blue).

Panel A : DPP6 (green) is expressed in the CA3 rat hippocampal region.

Panel B : KV4.2 (red) is expressed in the same region.

Panel C : Merge of the two images demonstrates partial colocalization in neurons of the CA3 region (arrows).


Dilution : 1:1000



GTX54792 IHC-Fr Image

WB analysis of mouse (lanes 1 and 3) and rat (lanes 2 and 4) brain lysates using GTX54792 DPP6 antibody preincubated with or without immunogen peptide.

Dilution : 1:200

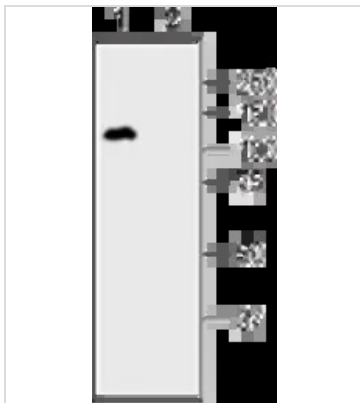

GTX54792 WB Image

WB analysis of SH-SY5Y cell lysates using GTX54792 DPP6 antibody preincubated with or without immunogen peptide.

Dilution : 1:500



For full product information, images and publications, please visit our [website](https://www.genetex.com).