

Nav1.5 antibody

Cat. No. GTX54803

宿主	Rabbit
克隆	Polyclonal
同种型	IgG
实验应用	WB, ICC/IF, IHC-P, FCM
种属反应	Human, Rat

实验应用

应用说明

*最佳稀释倍数与浓度应由研究人员确认

Suggested dilution	Recommended dilution
WB	Assay dependent
ICC/IF	Assay dependent
IHC-P	Assay dependent
FCM	Assay dependent

以下为常规应用缩写的中文注解

WB: 免疫印迹

ICC/IF: 细胞染色

IHC-P: 石蜡切片

IHC-Fr: 冰冻切片


属性

形式	Liquid
存储溶液	PBS, 1% BSA
保存剂	0.05% Sodium azide
存放说明	Store as concentrated solution. Centrifuge briefly prior to opening vial. For short-term storage (1-2 weeks), store at 4°C. For long-term storage, aliquot and store at -20°C or below. Avoid multiple freeze-thaw cycles.
浓度	0.95 mg/ml (Please refer to the vial label for the specific concentration.)
偶联	Unconjugated
注意事项	仅供实验室使用。不适用于人类或动物的任何临床、治疗或诊断用途。不适合动物或人类食用。



For full product information, images and publications, please visit our [website](#).


產品圖片

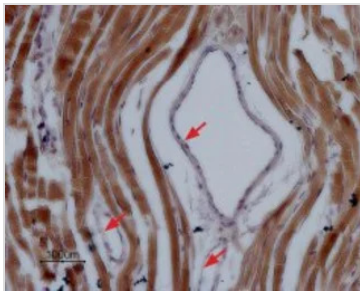

GTX54803 IHC-P Image

IHC-P analysis of rat cardiac muscle tissue using GTX54803 Nav1.5 antibody. Staining is specific for cardiomyocytes while smooth muscles cells in the artery walls are negative (red arrows). Hematoxylin is used as the counterstain.

Dilution : 1:100

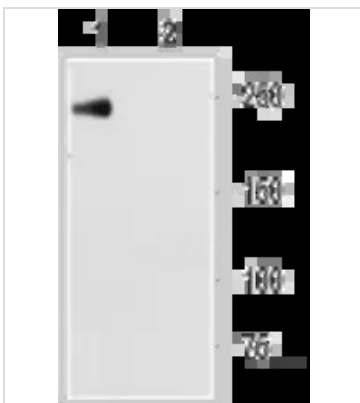

GTX54803 WB Image

WB analysis of NaV1.5 transfected HEK-293 cell lysate using GTX54803 Nav1.5 antibody preincubated with or without immunogen peptide.

Dilution : 1:200



For full product information, images and publications, please visit our [website](https://www.genetex.com).