

NeuN antibody [HL2194]

Cat. No. GTX638198

宿主	Rabbit
克隆	Monoclonal
同种型	IgG
实验应用	ICC/IF, IHC-P, IHC-Fr
种属反应	Mouse, Rat

实验应用

应用说明

*最佳稀释倍数与浓度应由研究人员确认

Suggested dilution	Recommended dilution
ICC/IF	1:100-1:1000
IHC-P	1:100-1:1000
IHC-Fr	1:100-1:1000

以下为常规应用缩写的中文注解

WB: 免疫印迹

ICC/IF: 细胞染色

IHC-P: 石蜡切片

IHC-Fr: 冰冻切片


属性

形式	Liquid
存储溶液	PBS
保存剂	No preservative
存放说明	Store as concentrated solution. Centrifuge briefly prior to opening vial. For short-term storage (1-2 weeks), store at 4°C. For long-term storage, aliquot and store at -20°C or below. Avoid multiple freeze-thaw cycles.
浓度	1 mg/ml (Please refer to the vial label for the specific concentration.)
偶联	Unconjugated
注意事项	仅供实验室使用。不适用于人类或动物的任何临床、治疗或诊断用途。不适合动物或人类食用。



For full product information, images and publications, please visit our [website](#).

產品圖片

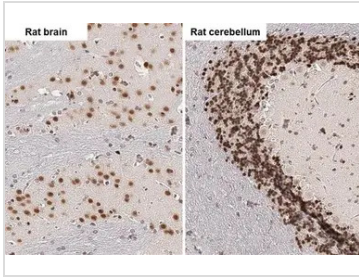


GTX638198 IHC-P Image

NeuN antibody [HL2194] detects NeuN protein by immunohistochemical analysis.

Sample: Paraffin-embedded rat tissues.

NeuN stained by NeuN antibody [HL2194] (GTX638198) diluted at 1:100.

Antigen Retrieval: Citrate buffer, pH 6.0, 15 min

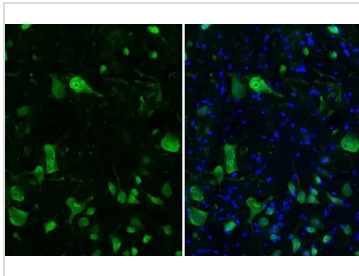


GTX638198 IHC-Fr Image

NeuN antibody [HL2194] detects NeuN protein at cytoplasm and nucleus by immunohistochemical analysis.

Sample: Frozen-sectioned mouse spinal cord.

Green: NeuN stained by NeuN antibody [HL2194] (GTX638198) diluted at 1:100.

Blue: Fluoroshield with DAPI (GTX30920).

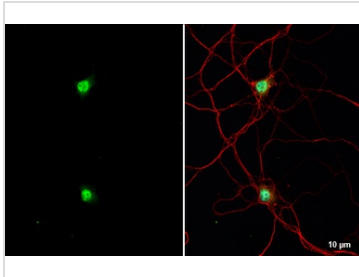

GTX638198 ICC/IF Image


NeuN antibody [HL2194] detects NeuN protein at nucleus by immunofluorescent analysis.

Sample: DIV9 rat E18 primary hippocampal neuron and glia cells were fixed in 4% paraformaldehyde at RT for 15 min.

Green: NeuN stained by NeuN antibody [HL2194] (GTX638198) diluted at 1:500.

Red: Tau, an axon marker, stained by Tau antibody [GT287] (GTX634809) diluted at 1:500.

Blue: Fluoroshield with DAPI (GTX30920).

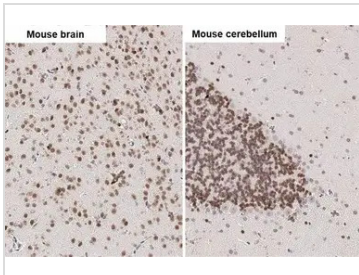

GTX638198 IHC-P Image

NeuN antibody [HL2194] detects NeuN protein by immunohistochemical analysis.

Sample: Paraffin-embedded mouse tissues.

NeuN stained by NeuN antibody [HL2194] (GTX638198) diluted at 1:100.

Antigen Retrieval: Citrate buffer, pH 6.0, 15 min



For full product information, images and publications, please visit our [website](#).