

GBE1 antibody [4D9]

Cat. No. GTX84453

宿主	Mouse
克隆	Monoclonal
同种型	IgG2a
实验应用	WB, ICC/IF, FCM, IP
种属反应	Human

实验应用

应用说明

*最佳稀释倍数与浓度应由研究人员确认

Suggested dilution	Recommended dilution
WB	1:2000
ICC/IF	1:100
FCM	1:100
IP	2ug/500ul

以下为常规应用缩写的中文注解

WB: 免疫印迹

ICC/IF: 细胞染色

IHC-P: 石蜡切片


IHC-Fr: 冰冻切片

属性

形式	Liquid
存储溶液	PBS, 1% BSA, 50% Glycerol
保存剂	0.02% Sodium azide
存放说明	Store as concentrated solution. Centrifuge briefly prior to opening vial. For short-term storage (1-2 weeks), store at 4°C. For long-term storage, aliquot and store at -20°C or below. Avoid multiple freeze-thaw cycles.
浓度	0.7 mg/ml (Please refer to the vial label for the specific concentration.)
偶联	Unconjugated
注意事项	仅供实验室使用。不适用于人类或动物的任何临床、治疗或诊断用途。不适合动物或人类食用。

For full product information, images and publications, please visit our [website](#).


產品圖片

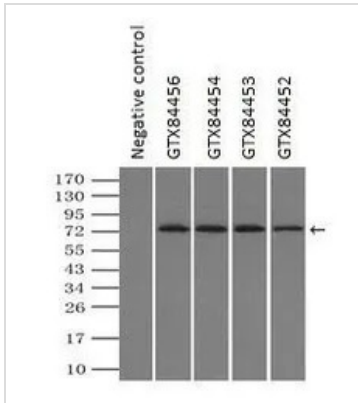

GTX84453 IP Image

IP analysis of DDDDK tagged GBE1 overexpressed HEK293T lysate using GTX84453 GBE1 antibody [4D9]. After extensive wash to remove any non-specific binding, the immuno-precipitated products were analyzed with rabbit anti-DDDDK polyclonal antibody.

IP reaction : 2µg antibody / 500µl cell lysate

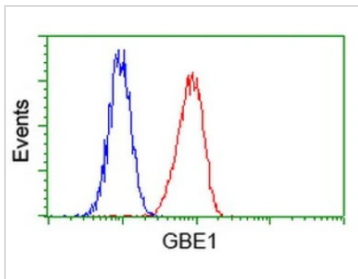


GTX84453 FCM Image

FACS analysis of HeLa cells using GTX84453 GBE1 antibody [4D9].


Red : Primary antibody

Blue : Negative control antibody

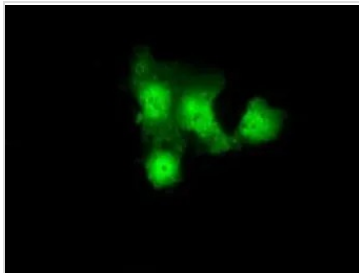

GTX84453 ICC/IF Image

ICC/IF analysis of COS7 cells transiently transfected with GBE1 plasmid using GTX84453 GBE1 antibody [4D9].

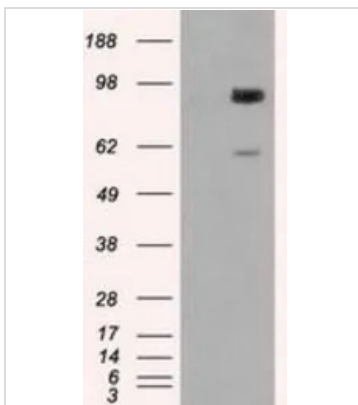

GTX84453 WB Image

WB analysis of HEK293T cells transfected with GBE1 plasmid (Right) or empty vector (Left) for 48 hrs using GTX84453 GBE1 antibody [4D9].

Loading : 5 ug per lane



For full product information, images and publications, please visit our [website](http://www.genetex.com).